
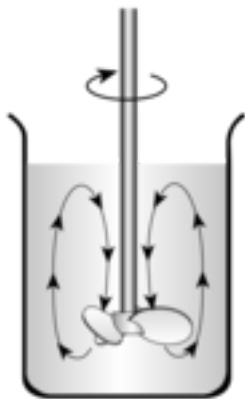


PR 39 Propellerrührer

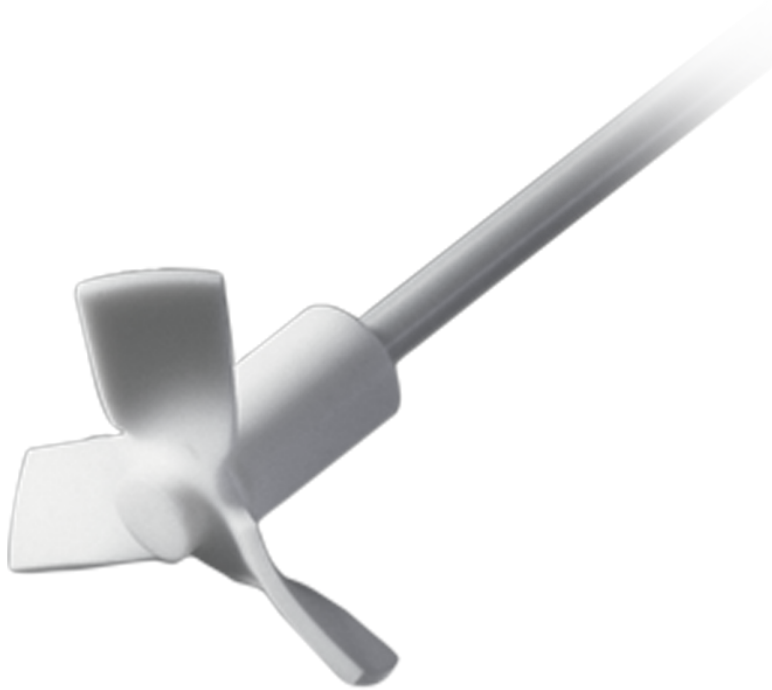

Propellerrührer

- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren bis hohen Drehzahlbereich
- Zum Mischen von Medien mit geringer bis mittlerer Viskosität
- Ideal zum Homogenisieren und Suspensieren
- Diese Modelle bilden vornehmlich eine axiale Strömung

PR 39 Propellerrührer - Technische Daten

Blattabmessung	75 mm
Material	PTFE
Länge	350 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	800 U/min