


## TR 21 Turbinenrührer

Artikelnummer: 509-21000-00

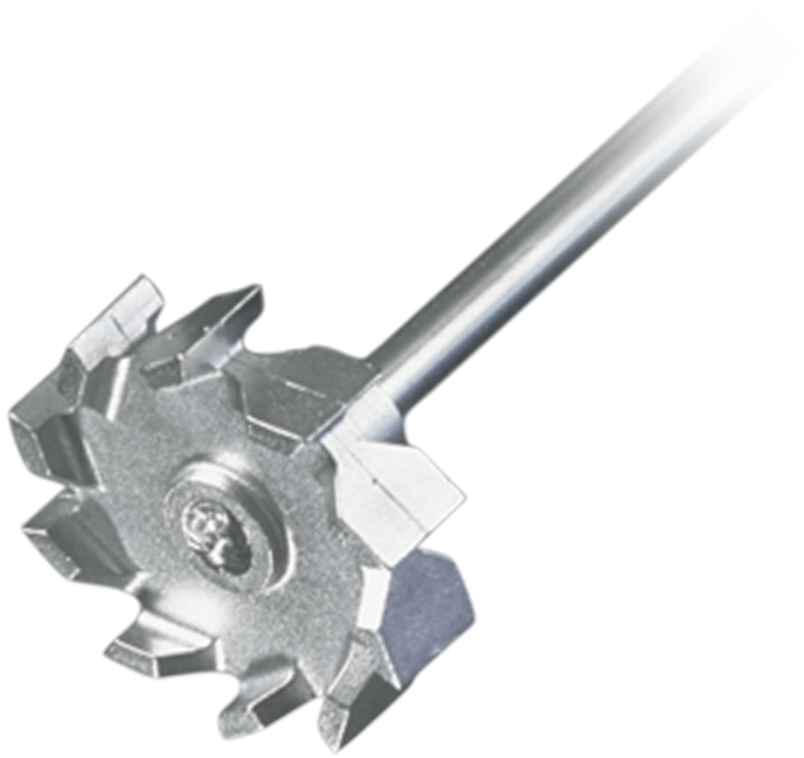

### Turbinenrührer

- Dieser Rührflügel eignet sich besonders gut für Anwendungen im mittleren bis hohen

Drehzahlbereich

- Zum Mischen von Medien mit niedriger bis mittlerer Viskosität  $< 500 \text{ mPa s}$
- Ideal zum Begasen von Flüssigkeiten
- Diese Modelle bilden vornehmlich eine radiale Strömung

## TR 21 Turbinenrührer - Technische Daten

Blattabmessung	50 mm
Material	Edelstahl V4A (1.4404)
Länge	400 mm
Rührwellendurchmesser	8 mm
Max. Drehgeschwindigkeit	2.000 U/min