

자동화 모듈

Hei-VOLUME Distimatic

스마트한 연속 농축법

Distimatic 자동 모듈

고유의 잔여물 배출 기능과 함께 무제한의 양을
무인 연속 작동으로 자동 증류할 수 있습니다.

하루 24시간,
일주일 동안 작동 가능.




- 용매 혼합물 및 농축물의 자동 공급 및 분리
- 자동 무인 연속 작동으로 거의 100%에 가까운 용매 분리
- 최종 농축물을 개별 설정해 완전한 건조, 결정화, 파우더 형성 방지
- 자동 소량 공급으로 거품 형성 방지
- 가동 공정 중에 저장 및 콜렉터 용기 교체 가능
- 센서를 통한 실시간 공정 모니터링, 비상시 전체 시스템 차단 포함
- 모든 Heidolph 회전 농축기 및 대용량 회전 농축기와 호환 가능

Hei-VOLUME Distimatic

자동 24/7 농축

공정 원리

- 1 진공 밸브
- 2 콜렉터 밸브
- 3 벤트 밸브
- 4 농축물 펌프
- 5 잔여물 펌프

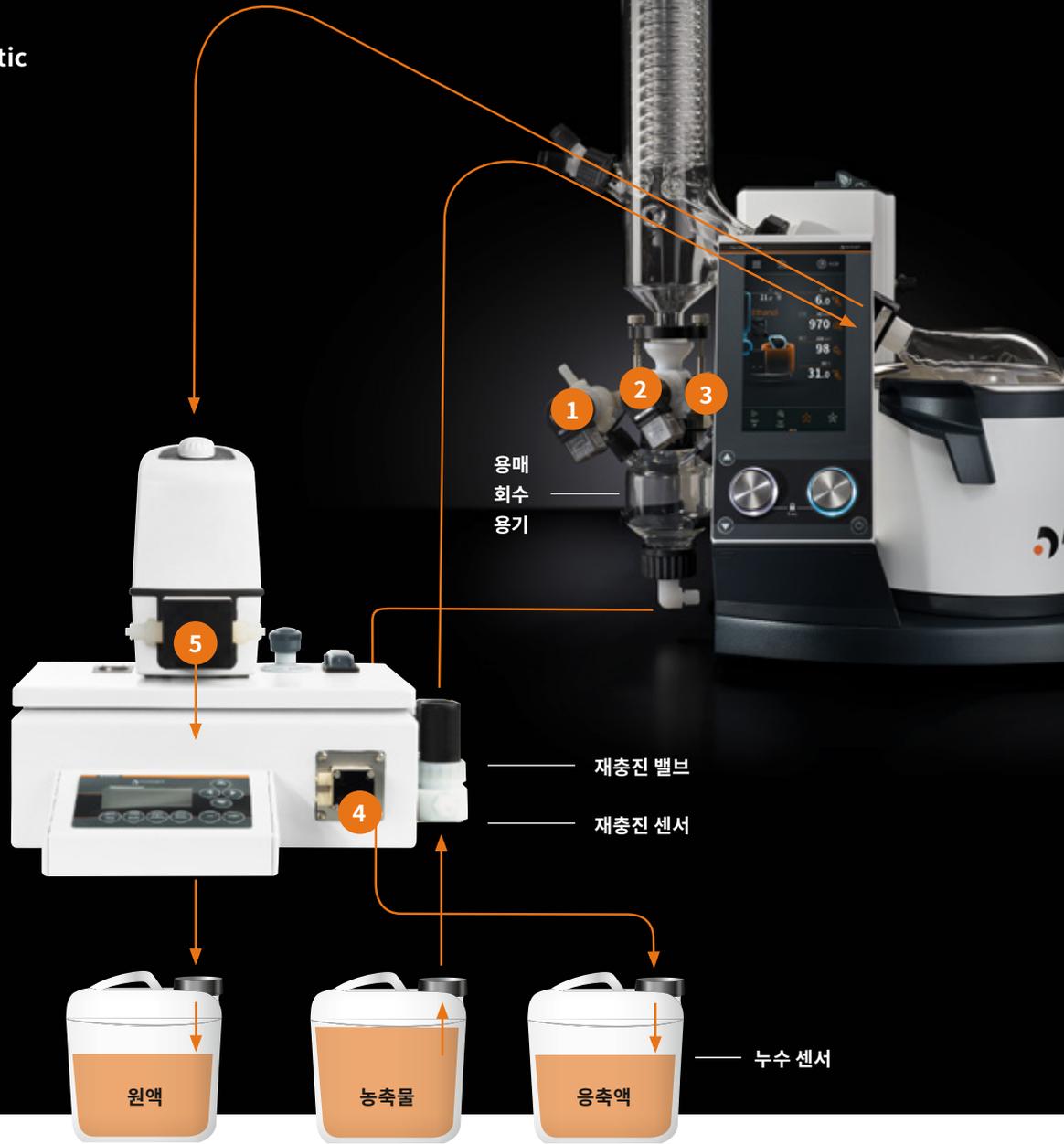

Distimatic Integration Package

농축액 배출 기능 미포함 기존 진공 및 냉각액 시스템에 통합

- Hei-VAP Ultimate Control ML G9B XL
- 튜빙 세트
- 농축물 자동 배출 기능 미포함 Distimatic

P/N 576-82915-00

Distimatic Integration Package 24/7

농축액 배출 기능 포함된 기존 진공 및 냉각액 시스템에 통합

- Hei-VAP Ultimate Control ML G9B XL
- 튜빙 세트
- 자동 배출 기능 포함 Distimatic

P/N 576-83915-00

Distimatic Workstation

농축액 배출 기능 없는 완전한 패키지

- Hei-VAP Ultimate Control ML G9B XL
- Hei-CHILL 1200
- Kryo 30 (20리터)
- RS 232 케이블
- Rotavac Vario Control
- Rotavac Vario Control 전용 콘덴서
- 튜빙 세트
- 농축물 자동 배출 기능 미포함 Distimatic
- 가열 수조 용액(5리터)
- 5리터 농축용 플라스크

P/N 576-80915-00

Distimatic Workstation 24/7

농축액 배출 기능 없는 완전한 패키지

- Hei-VAP Ultimate Control ML G9B XL
- Hei-CHILL 1200
- Kryo 30 (20리터)
- RS 232 케이블
- Rotavac Vario Control
- Rotavac Vario Control 전용 콘덴서
- 튜빙 세트
- 농축물 자동 배출 기능 포함 Distimatic
- 가열 수조 용액(5리터)
- 5리터 농축용 플라스크

P/N 576-81915-00

새로운 자동 모듈 - Distimatic에 대해 더 자세히 알아보시려면
www.heidolph-instruments.com를 방문해 주세요.