


Varilla de pala inclinada PR 39

P/N: 509-39000-10

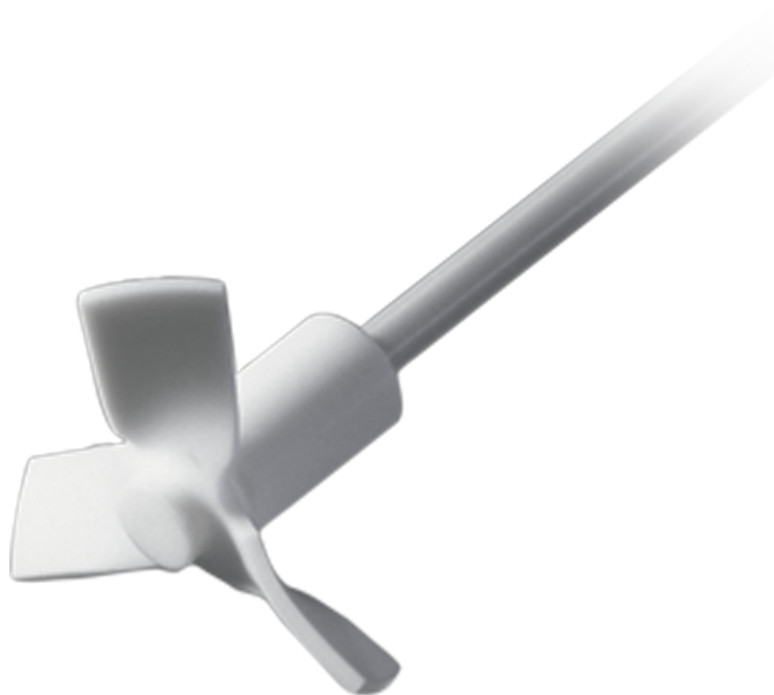

Varilla de tipo hélice

- Varillas recomendadas para aplicaciones que necesiten una velocidad media o alta
- Para tareas de mezclado con viscosidad media o alta
- Excelentes propiedades de mezcla para homogeneización y suspensiones
- Estos modelos crean un flujo axial

Varilla de pala inclinada PR 39 - Datos técnicos

Tamaño de pala	75 mm
Material	PTFE
Longitud	350 mm
Diámetro del eje	8 mm
Velocidad de rotación máx.	800 rpm