


Hélice avec anneau PR 32

Référence: 509-32000-00

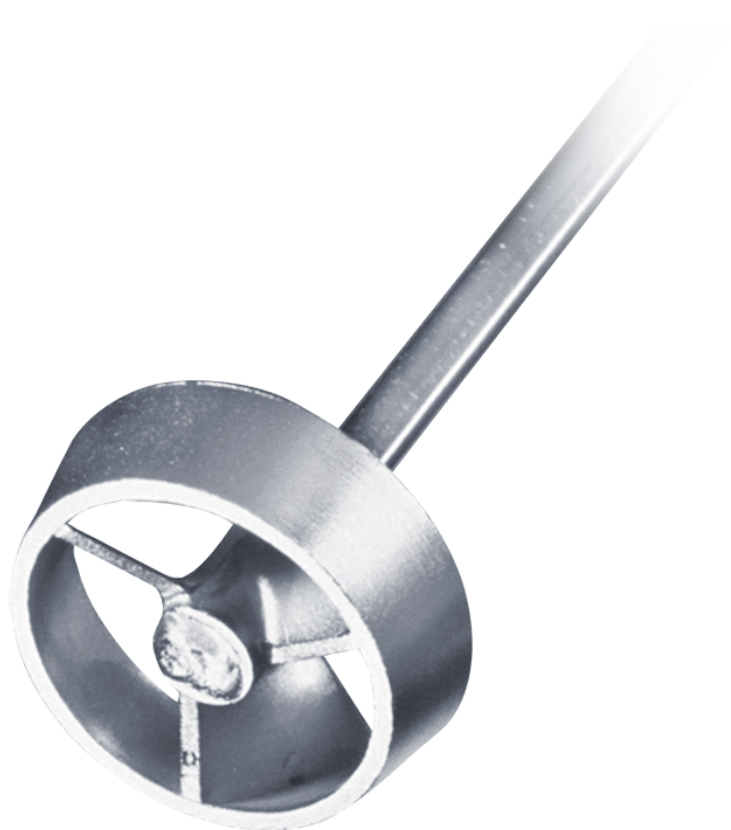

Grâce aux dimensions de sa pale centrifuge, la tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau PR 32 est parfaitement adaptée aux solutions, aux émulsions et aux suspensions dans des récipients qui affichent les caractéristiques suivantes :

- diamètre idéal du récipient : 113 à 225 mm
- distance au fond idéale : 23 à 45 mm
- hauteur de remplissage idéale : 113 à 225 mm
- volume idéal : 1 100 à 8 900 ml

La tige d'agitation type hélice 3 pales avec anneau PR 32 a une longueur totale de 400 mm et est en acier inoxydable. Son arbre d'agitation a un diamètre de 8 mm.

Hélice avec anneau PR 32 - Données techniques

Taille des pâles	45 mm
Matériau	acier inoxydable V4A
Longueur	400 mm
Diamètre de l'arbre	8 mm
Vitesse maximum de rotation	2 000 rpm