


PR 32 elica ad anello

P/N: 509-32000-00

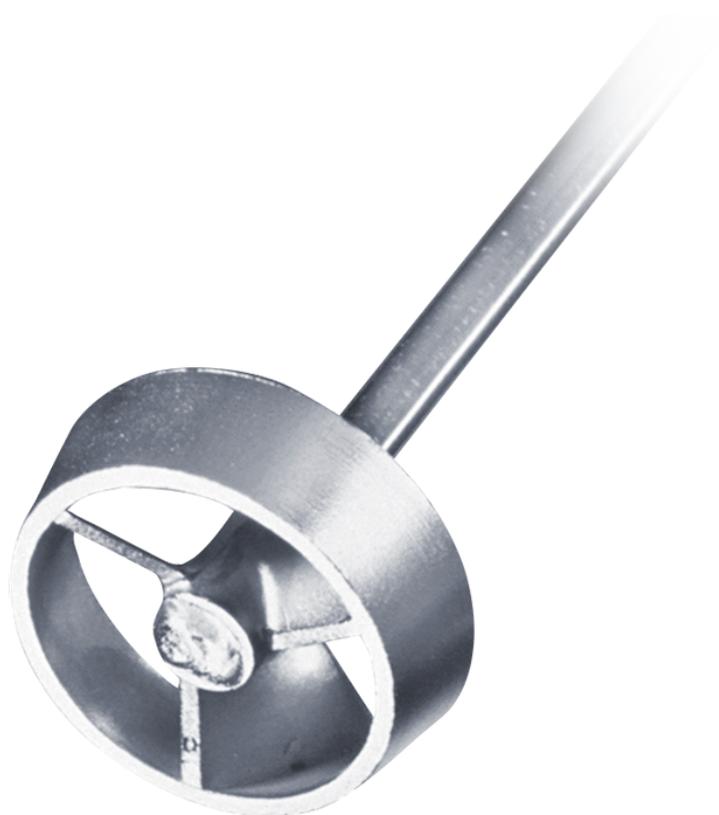

Grazie alle dimensioni delle pale, la girante ad elica con anello PR 32 è ideale per soluzioni, emulsioni e sospensioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:

- diametro ideale del recipiente: 113 - 225 mm
- distanza ideale dal fondo: 23 - 45 mm
- livello di riempimento ideale: 113 - 225 mm
- volume ideale: 1.100 - 8.900 ml

L'utensile agitatore con girante ad elica con anello PR 32 ha una lunghezza totale di 400 mm ed è in acciaio inossidabile. L'albero ha un diametro di 8 mm.

PR 32 elica ad anello - Dati tecnici

Dimensione lama	45 mm
Materiale	Acciaio inossidabile V4A
Lunghezza	400 mm
Diametro albero	8 mm
Velocità di rotazione max.	2.000 rpm