


PR 31 고리 경사형 블레이드 임펠러(33mm)

P/N: 509-31000-00

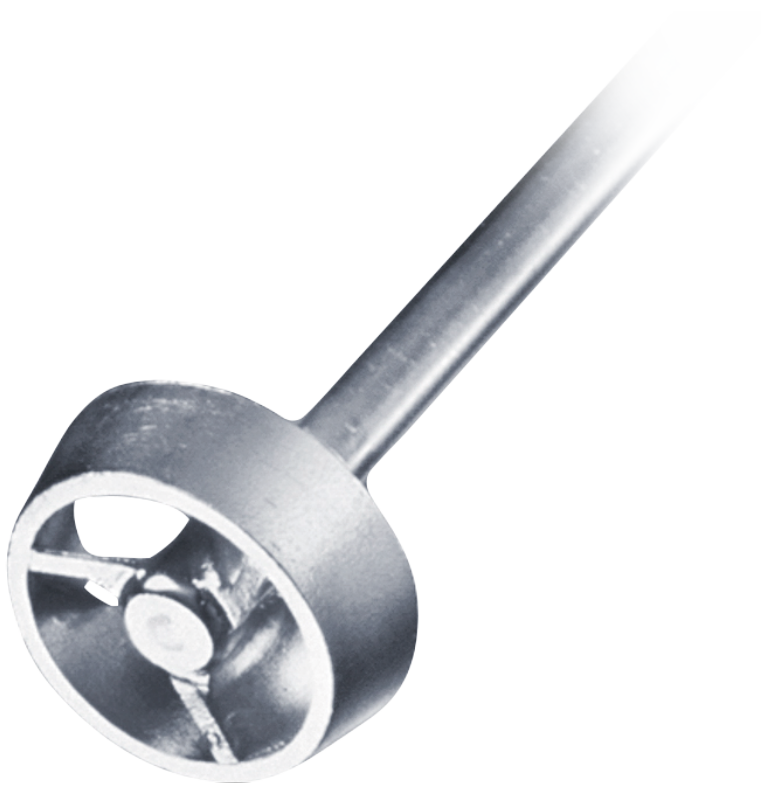

블레이드 규격으로 인해, 고리 경사형 블레이드 임펠러 BR 31은 다음과 같은 특성의 용기에서 용액, 유화 및 휴지에 대해 이상적입니다.

- 이상적인 용기 규격: 83~165mm
- 용기에서 높이: 17~33mm
- 충전 높이: 83~165mm
- 이상적인 부피: 400~3,500ml

고리 경사형 블레이더 임펠러 BR 31은 총 길이 400mm이며 스테인리스으로 만들었습니다. 자체 교반 샤프트 지름은 8mm입니다.

PR 31 고리 경사형 블레이드 임펠러(33mm) - 기술 데이터

블레이드 사이즈	33 mm
재료	스테인리스강 V4A
길이	400 mm
샤프트 지름	8 mm
최대 회전 속도	2,000 rpm