


AR 19 앵커형 임펠러

P/N: 509-19000-10

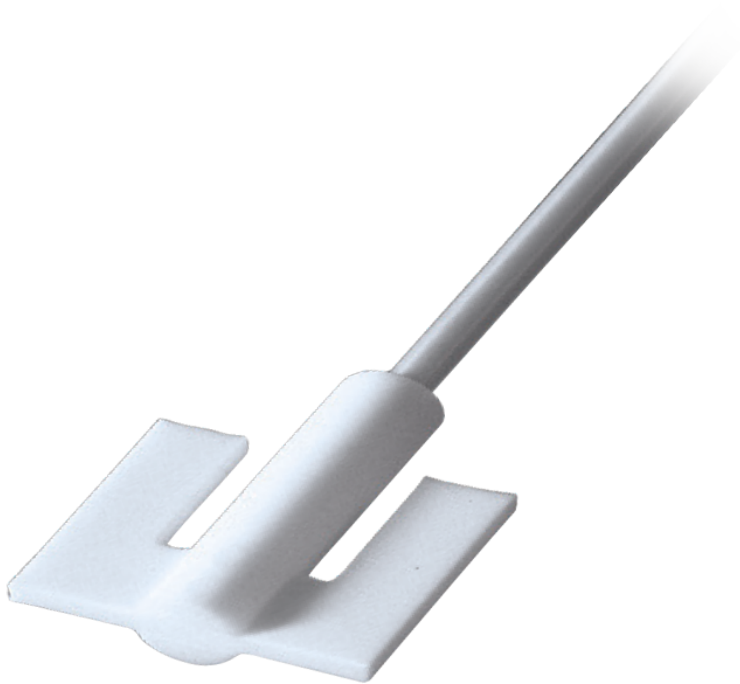

특히 매우 점도가 높은 샘플에서 사용 시, 혼합 공정을 용기 가장자리까지 가능하게 하는 교반기 도구를 사용하는 것이 중요합니다.

이는 앵커형 임펠러의 모양과 60mm라는 교반 블레이드의 너비를 설명해줍니다.

AR 19 앵커형 임펠러는 다음과 같은 특징을 갖춘 용기에 적합합니다.

- 이상적인 용기 지름: 67 mm
- 용기 밑에서 높이: 2 mm
- 충전 높이: 67 mm
- 이상적인 부피: 200 ml

앵커형 임펠러는 PTFE 블레이드 1개와 PTFE 코팅 스테인리스 샤프트 1개로 구성됩니다. 스테인리스 중심부가 교반기 샤프트의 안정성과 오버헤드 교반기 내 안전한 장착을 보장합니다. 클램핑 영역 내 지름은 6.5mm이며, 두꺼운 벽의 PTFE 코팅 교반기 샤프트는 지름이 8mm입니다.

자체의 반부착성 특성(논스틱 코팅)으로 인해, 앵커형 임펠러는 청소가 쉽고 최대 적용온도 250 °C까지 사용할 수 있습니다.

AR 19 앵커형 임펠러 - 기술 데이터

블레이드 사이즈	60 x 40 x 5 mm
재료	PTFE
길이	350 mm
샤프트 지름	8 mm
최대 회전 속도	800 rpm