


VISCO JET[®] CRACK - 120 mm

P/N: 509-17120-00

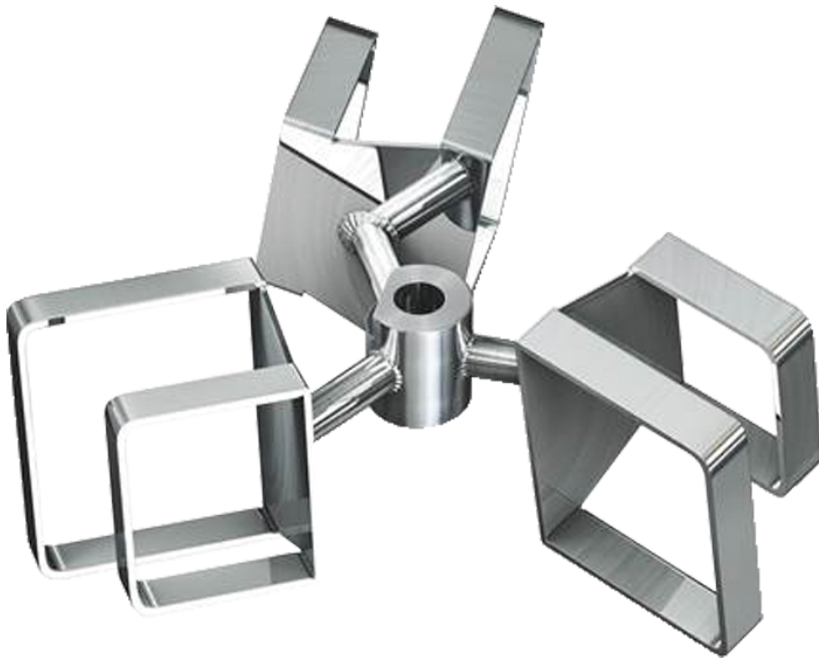

페이스트와 젤과 같은 매우 점도가 높은 샘플 사용하는 실험의 경우 특히 용기 전체에서 샘플에 공기의 유입없는 매우 정교한 교반 공정이 중요합니다. 그리고 혁신적인 교반 시스템 VISCO JET[®]가 이를 가능하게 해줍니다!

블레이드의 특정한 모양이 본질적으로 역동적인 흐름을 촉진하고, 이는 기존의 임펠러와 비교해 상당히 개선된 혼합 결과로 공정 시간을 단축합니다. 저점도부터 고점도의 샘플까지 모두 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [여기에서](#) 확인하실 수 있습니다.

VISCO JET[®] Crack 120은 다음과 같은 특성의 용기에 대해 이상적입니다.

- 이상적인 용기 지름: 200~300mm
- 이상적인 지상고: 36mm
- 이상적인 충전 레벨: 200~300mm
- 이상적인 용적: 6,300~21,200ml

VISCO JET[®] Crack 120은 스테인리스강으로 만들었습니다.
직경 10mm의 교반기 샤프트가 납품 범위에 포함됩니다.

VISCO JET[®] CRACK - 120 mm - 기술 데이터

블레이드 사이즈	120 mm
재료	스테인리스강 V4A
길이	500 mm
샤프트 지름	10 mm
용기 지름	170~300 mm
속도 범위	120~500rpm